




可溶性淀粉合成酶（SSS）活性检测试剂盒
Soluble Starch Synthase (SSS) Activity Assay Kit



北京盒子生工科技有限公司
Beijing Boxbio Science & Technology Co., Ltd.

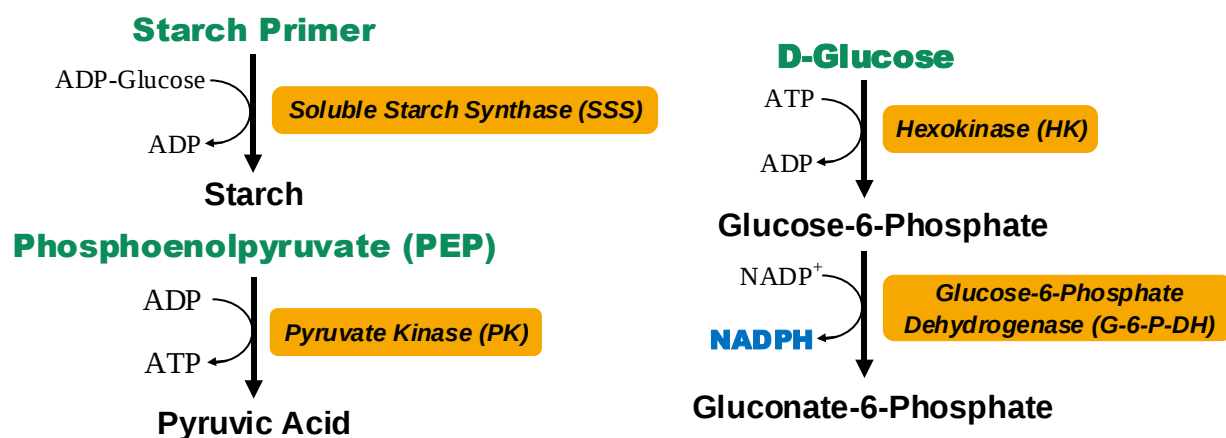

可溶性淀粉合成酶（SSS）活性检测试剂盒

Soluble Starch Synthase (SSS) Activity Assay Kit

一、产品描述

可溶性淀粉合成酶是淀粉合成代谢途径中关键酶之一，主要参与支链淀粉中分支链的合成，以腺苷二磷酸葡萄糖（ADPG）为葡萄糖供体，通过糖基转移催化 α -1,4-糖苷键延长形成葡聚糖，可溶性淀粉合成酶活性与总淀粉和支链淀粉积累速率呈正相关，对两者含量的积累起着重要调节作用。

可溶性淀粉合成酶催化 ADPG 与淀粉引物（葡聚糖）反应，将葡萄糖分子转移到淀粉引物上并生成 ADP，再通过丙酮酸激酶、己糖激酶和 6-磷酸葡萄糖脱氢酶依次催化 NADP^+ 还原为 NADPH，NADPH 在 340 nm 处具有特征吸收峰，通过吸光值变化即可表征可溶性淀粉合成酶的活性。

二、产品内容

名称		试剂规格	储存条件	使用方法及注意事项
提取液		液体 60 mL×1 瓶	4°C 保存	-
试剂一		液体 16 mL×1 瓶	4°C 保存	-
试剂二	组分 A	粉剂×2 瓶	4°C 保存	使用前每瓶组分 A 加入 8 mL 试剂一 缓慢加热，逐渐升温使其溶解，冷却至室温后 分别加入一支组分 B 和一支组分 C 充分溶解 (分装后-20°C 可保存 2 周，避免反复冻融)
	组分 B	粉剂×2 支	-20°C 保存	
	组分 C	粉剂×2 支	-20°C 保存	
试剂三	组分 A	液体 12 mL×1 瓶	4°C 保存	使用前每瓶组分 B 中加入 5 mL 组分 A 充分溶解 (分装后-20°C 可保存 4 周，避免反复冻融)
	组分 B	粉剂×2 瓶	-20°C 保存	
试剂四		液体 30 μ L×1 支	4°C 保存	使用前按照试剂四：试剂三=1:320 的体积比配制 充分混匀即为试剂四应用液 (根据使用量现用现配)
试剂五	组分 A	液体 18 mL×1 瓶	4°C 保存	使用前每瓶组分 B 加入 8 mL 组分 A 充分溶解， 再加入一支组分 C 充分溶解 (分装后-20°C 可保存 4 周，避免反复冻融)
	组分 B	粉剂×2 瓶	4°C 保存	
	组分 C	粉剂×2 支	4°C 保存	
试剂六		粉剂×4 支	-20°C 保存	使用前每支加入 208 μ L 蒸馏水充分溶解 (分装后-20°C 可保存 2 周，避免反复冻融)
试剂七		粉剂×1 支	-20°C 保存	使用前加入 2 mL 蒸馏水充分溶解 (分装后-20°C 可保存 2 个月，避免反复冻融)

三、产品使用说明

测定过程中所需要的仪器和试剂：紫外分光光度计、1 mL 石英比色皿（光径 10 mm）、研钵/匀浆器、可调式移液器、台式离心机、恒温水浴/培养箱和蒸馏水。

1.粗酶液的制备（可根据预实验结果适当调整样本量及比例）

按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：（5-10）的比例（建议称取 0.1 g 组织，加入 1 mL 提取液）处理样品，冰浴匀浆，4℃ 10000 g 离心 10 min，取上清即为粗酶液，置于冰上待测。

2.测定步骤

①紫外分光光度计预热 30 min 以上，调节波长至 340 nm，蒸馏水调零。

②在离心管中依次加入下列试剂：

试剂	测定组 (μL)
粗酶液	200
试剂二	270
①充分混匀，30℃准确反应 20 min；	
②立即沸水浴处理 1 min，冰浴冷却至室温；	
试剂四应用液	150
①充分混匀，30℃准确反应 30 min；	
②沸水浴处理 1 min，冰浴冷却至室温；	
③10000 g 常温离心 10 min，取上清液；	
上清液	450
试剂五	300
试剂六	15
试剂七	15

吸光值测定：充分混匀后立即将反应液置于 1 mL 石英比色皿中，测定 340 nm 处初始吸光值记为 A1 和 2 min 后吸光值记为 A2；计算 $\Delta A = A2 - A1$ 。

3.可溶性淀粉合成酶（SSS）活性计算

①按样本蛋白浓度计算

单位定义：每 mg 组织蛋白每分钟生成 1 nmol NADPH 定义为一个酶活性单位。

$$SSS \text{ (U/mg prot)} = \frac{\Delta A \times V_{\text{测}} \times V_{\text{反总}}}{\epsilon \times d \times C_{\text{pr}} \times V_{\text{样}} \times V_{\text{上清}} \times T} = \frac{43.2 \times \Delta A}{C_{\text{pr}}}$$

②按样本质量计算

单位定义：每 g 组织每分钟生成 1 nmol NADPH 定义为一个酶活性单位。

$$SSS \text{ (U/g)} = \frac{\Delta A \times V_{\text{测}} \times V_{\text{反总}} \times V_{\text{提}}}{\epsilon \times d \times W \times V_{\text{样}} \times V_{\text{上清}} \times T} = \frac{43.2 \times \Delta A}{W}$$

注释： V 反总：酶促反应体系总体积，0.62 mL；V 提：粗酶液总体积，1 mL；V 测：检测体系总体积，0.78 mL；V 上清：反应体系中加入上清液的体积，0.45 mL；V 样：反应体系中加入粗酶液的体积，0.2 mL；ε：NADPH 摩尔消光系数， 6.22×10^3 mL/nmol/cm；d：1 mL 石英比色皿光径，1 cm；T：反应时间，20 min；Cpr：样本蛋白浓度，mg/mL；W：样本质量，g。

四、注意事项

①准确在规定时间点完成吸光值测定，以确保实验结果的准确性和重复性；

②为保证结果准确且避免试剂损失，测定前请仔细阅读说明书（以实际收到说明书内容为准），确认试剂储存和准备是否充分，操作步骤是否清楚，且务必取 2-3 个预期差异较大的样本进行预测定，过程中问题请您及时与工作人员联系。

For Research Use Only. Not for Use in Diagnostic Procedures.

boxbio

Manufactured and Distributed by

Beijing Boxbio Science & Technology Co., Ltd.

Liaodong U Valley, Tongzhou District, Beijing, China

TEL: 400-805-8228

E-MAIL: techsupport@boxbio.cn

Copyright © 2020 Boxbio, All Rights Reserved.

